



B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE

| POWERED BY
PARTNERSHIPS

▶ ONZE PARTNERS

Lokaal en wereldwijd

Een internationale alliantie van sterke lokale wondzorg-ondernemingen/partners, die met elkaar verbonden zijn door gemeenschappelijke producten, gezamenlijke inkoopovereenkomsten en een gedeelde wereldwijde toeleveringsketen.



▶ ONZE MISSIE

Waardegerichte wondzorg

Een zorgvuldig geselecteerd wondzorgassortiment van hoge kwaliteit, in combinatie met gezamenlijke inkoop om betere prijzen te garanderen, zorgt voor een goede basis om een leider te worden in waardegerichte wondzorg.

▶ ONZE PRODUCTEN

Drie principes

Hoge kwaliteit, klinische effectiviteit en waarde zijn de principes waarop ons assortiment is bepaald. Dit zijn de drie punten waarop we nooit concessies zullen doen.

▶ B-WISE, WOUND CARE ALLIANCE

▶ Onze partners, onze missie, onze producten	3
▶ Inhoudsopgave	4 - 5

▶ SILICONEN FOAM SCHUIMVERBAND

De voordelen van een uitstekende, meerlaagse, absorberende foam schuimstructuur, met als bijkomend voordeel een siliconen wondcontactlaag die zorgt voor een delicate verzorging van de wond en van de broze, gevoelige huid. Het garandeert ook een doeltreffende passage van exsudaat met een hogere viscositeit.

▶ Siliconen foam schuimverband - met border	6 - 7
▶ Siliconen foam schuimverband - zonder border	6 - 7

▶ GELEREND VEZELVERBAND EXTRA

Zeer goede absorptie en retentie, waarbij oa. bacteriën in exsudaat worden ingesloten. Het verband absorbeert snel en creëert een semi-transparante gel die lekkage en maceratie voorkomt en gelijktijdig ook zorgt voor de gewenste optimaal vochtige omgeving voor wondheling. Versterkte structuur voor eenvoudige aanpassing en verwijdering.

▶ Gelerend vezelverband extra	8
-------------------------------	---

▶ SUPERABSORBEREND VERBAND

Zeer hoge absorptie van exsudaat – zeer hoge retentie. Biedt bijkomende klinische voordelen door bacteriën en MMP's te binden in de superabsorberende kern.

▶ Superabsorberend verband - zonder border	9
▶ Superabsorberend verband extra (extra hoge absorptie) - zonder border	10 - 11
▶ Superabsorberend verband extra met siliconen contactlaag - zonder border	10 - 11

INHOUDSOPGAVE

▶ **SUPERABSORBEREND VERBAND MET ACTIEVE KOOL**

Een doeltreffende wegname van wondgeur betekent een betere levenskwaliteit voor patiënten. Dit superabsorberend verband met actieve kool is de ideale oplossing voor wonden met een onwelriekende geur. Het biedt ook alle voordelen van een superabsorberend verband.

▶ Superabsorberend verband met actieve kool - zonder border

12

▶ **NIET-HECHTEND LIPIDO-COLLOÏDE VERBAND**

Zorgt voor een vochtige omgeving om de wond te laten helen, maar maakt tegelijk ook een pijnloze, atraumatische verwijdering mogelijk. Door nieuw ontworpen openingen wordt exsudaat met een hogere viscositeit effectiever doorgelaten.

▶ Niet-hechtend lipido-colloïde verband

13

▶ **ZACHT SILICONEN PRIMAIR WONDVERBAND**

Een poreuze en atraumatische éézijdige siliconen wondcontactlaag. Door nieuw ontworpen openingen wordt exsudaat met een hogere viscositeit effectiever doorgelaten.


▶ Zacht siliconen primair wondverband

14



SILICONEN FOAM SCHUIMVERBAND

MET BORDER

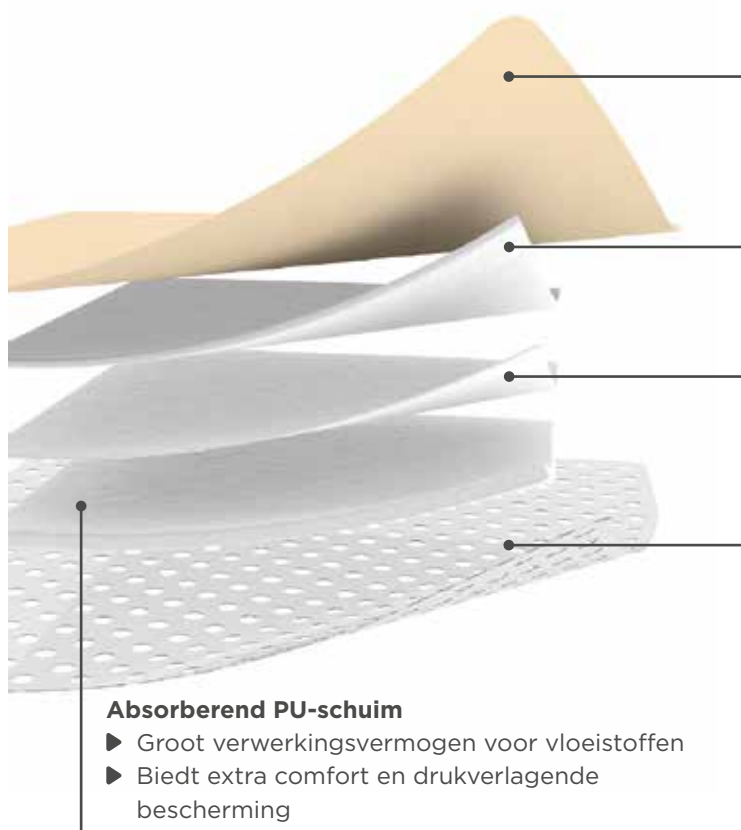

Absorberend PU-schuim

- ▶ Groot verwerkingsvermogen voor vloeistoffen
- ▶ Biedt extra comfort en drukverlagende bescherming

Beschermende achterzijde

- ▶ Ondoordringbaar voor vocht en bacteriën
- ▶ Hoge WDD (waterdampdoorlaatbaarheid)
- ▶ Glad en flexibel

Superabsorberende kern

- ▶ Uitzonderlijk absorptievermogen
- ▶ Minimaliseert het risico op maceratie

Non-woven laag

- ▶ Verspreid exsudaat over een breed oppervlak
- ▶ Verbeterd het absorptievermogen

Siliconen wondcontactlaag

- ▶ Siliconen gelcoating met perforatietechnologie
- ▶ Zorgt voor overdracht van wondexsudaat naar de absorberende laag
- ▶ Biedt delicate verzorging voor de wond en de omliggende gevoelige huid
- ▶ De open structuur maakt een doeltreffende absorptie van exsudaat met een hogere viscositeit mogelijk

ZONDER BORDER



Absorberend PU-schuim

- ▶ Groot verwerkingsvermogen voor vloeistoffen
- ▶ Biedt extra comfort en drukverlagende bescherming

Beschermende achterzijde

- ▶ Ondoordringbaar voor vocht en bacteriën
- ▶ Hoge WDD (waterdampdoorlaatbaarheid)
- ▶ Glad en flexibel

Siliconen wondcontactlaag

- ▶ Siliconengel met perforatietechnologie
- ▶ Verdeelt het wondexsudaat snel en gelijkmatig
- ▶ Veilige fixatie en bescherming van de epidermale cellen
- ▶ Pijnloze en atraumatische verwijdering van de wond en omliggende huid

Uitstekende exsudaatmanagement en tegelijkertijd delicate verzorging van de broze en gevoelige huid

GEBRUIK

Indicaties

- Decubitus
- Chirurgische wonden
- Diabetische ulcera
- Eerste- en tweedegraads brandwonden
- Skin tears
- Beenulcera (bijvoorbeeld veneuze ulcera, ulcera van gemengde etiologie)
- Donorplaatsen

Fase wond  

Exsudaatniveau

Laag - Hoog



Siliconen foam schuimverband (met border)



Siliconen foam schuimverband (zonder border)


PRODUCTCODES

Type product	Referentiecode	Afmeting (afmeting wondkussen)	Stuks per verpakking
Met border	SFB100100	10 x 10 cm (6,2 x 6,2 cm)	10 stuks
Met border	SFB150150	15 x 15 cm (10.5 x 10.5)	10 stuks
Met border	SFB200200	20 x 20 cm (15 x 15 cm)	10 stuks
Met border	SFB230230S	Sacral - 23 x 23 cm (16,5 x 17 cm)	10 stuks
Zonder border	SF075075	7.5 x 7.5 cm	10 stuks
Zonder border	SF100100	10 x 10 cm	10 stuks
Zonder border	SF150150	15 x 15 cm	10 stuks
Zonder border	SF200200	20 x 20 cm	10 stuks

GELEREND VEZELVERBAND EXTRA

ZONDER BORDER

Zeer hoge absorptie en retentie terwijl exsudaat (incl. bacteriën) worden ingesloten. Eenvoudig te verwijderen!

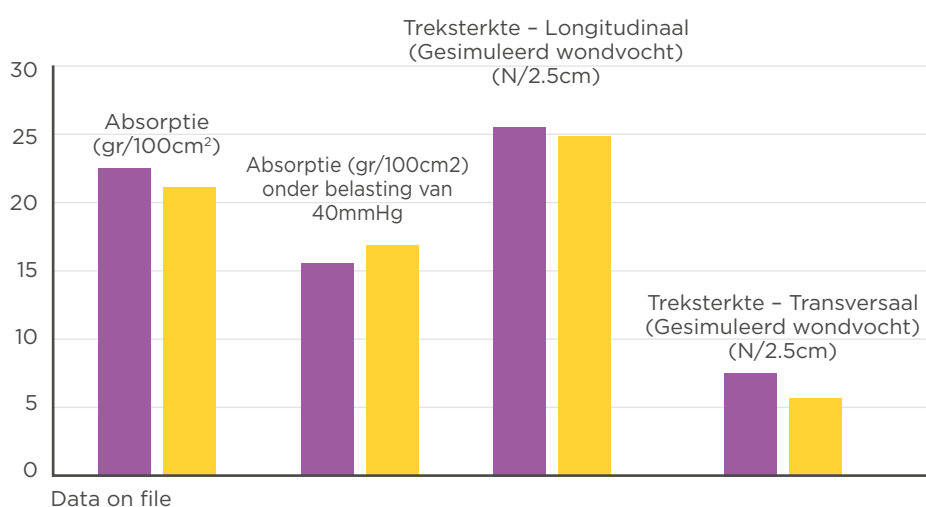

■ Gelerend vezelverband extra
■ Marktleider Hydrofiber Extra

Het verband absorbeert snel en creëert een semi-transparante gel, die lekkage en maceratie voorkomt. Gelijktijdig zorgt het voor de gewenste optimaal vochtige omgeving voor wondheling. Versterkt voor eenvoudige aanpassing en verwijdering.

GEBRUIK

Indicaties

- Decubitus
- Chirurgische wonden
- Diabetische ulcera
- Eerste- en tweedegraads brandwonden
- Skin tears
- Beenulcera (bijvoorbeeld veneuze ulcera, ulcera van gemengde etiologie)
- Donorplaatsen

Fase wond



Exsudaatniveau

Laag - Medium




PRODUCTCODES

Referentiecode	Afmeting	Stuks per verpakking	Close up
GFR020450	2 x 45 cm	10 stuks	
GFR050050	5 x 5 cm	10 stuks	
GFR100100	10 x 10 cm	10 stuks	
GFR150150	15 x 15 cm	10 stuks	

SUPERABSORBEREND VERBAND

ZONDER BORDER

Uitstekende absorptie en retentie van exsudaat,
ook onder compressie

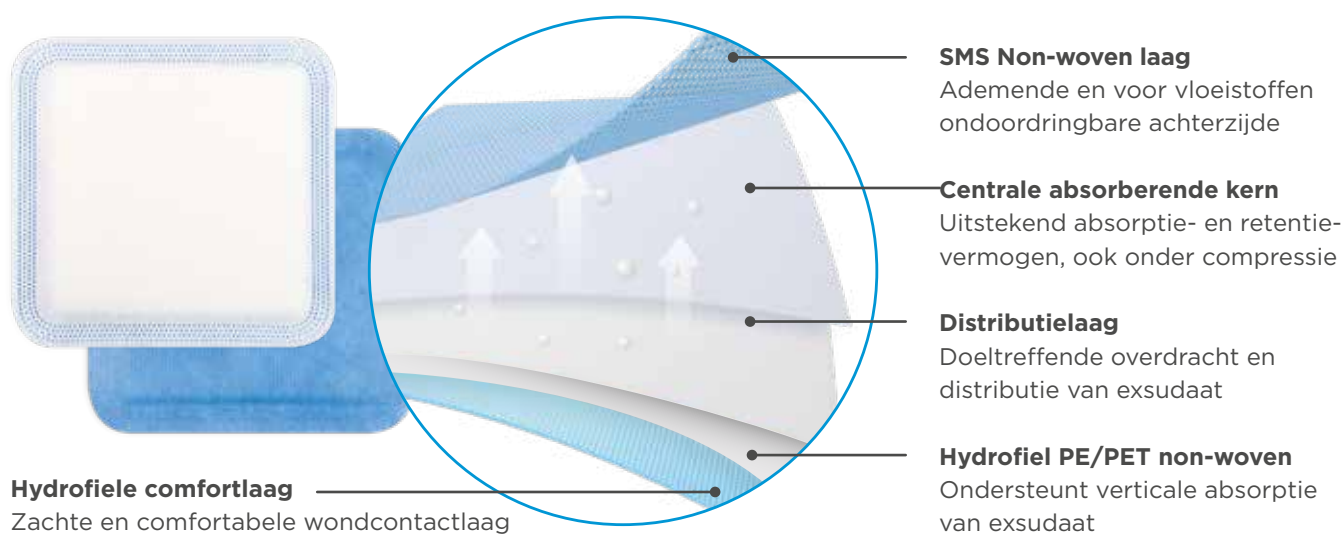

Een zeer comfortabel verband, ontworpen om hoge hoeveelheden exsudaat op te kunnen vangen. Deze worden geabsorbeerd en vastgehouden in de superabsorberende kern, zelfs onder compressie. MMP's en bacteriën worden gebonden in deze kern, wat bijdraagt aan de doeltreffende genezing van de wond. In tegenstelling tot veel superabsorberende verbanden, kan dit verband viskeus exsudaat goed verwerken, door de gemengde kern met SAP's en natuurlijke vezels. De vormvastheid van de dressing garandeert continuering van absorptie.

PRODUCTCODES

Referentiecode	Afmeting	Stuks per verpakking
SA100100	10 x 10 cm	10 stuks
SA100200	10 x 20 cm	10 stuks
SA150150	15 x 15 cm	10 stuks
SA200200	20 x 20 cm	10 stuks

GEBRUIK

Indicaties

- ▶ Diabetische voetulcera
- ▶ Beenulcera
(veneus en arterieel)
- ▶ Decubitus
- ▶ Eerste- en tweedegraads
brandwonden
- ▶ Acute wonden

Fase wond




Exsudaatniveau

Medium - Heel hoog



(SILICONEN) SUPERABSORBEREND VERBAND EXTRA

ZONDER BORDER

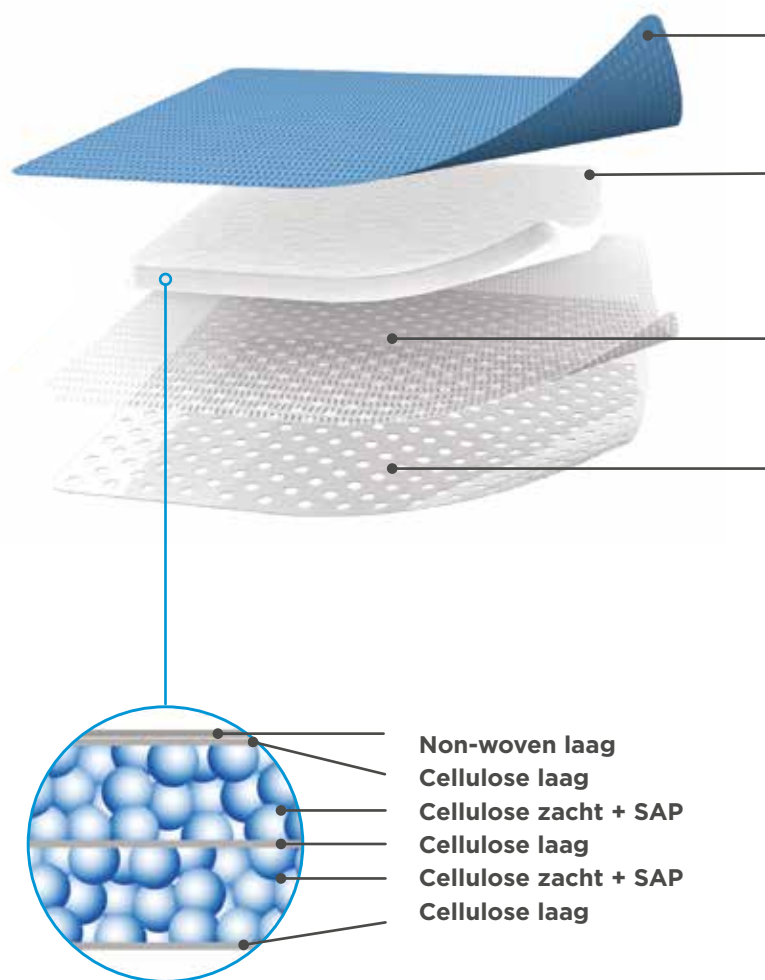

Beschermende laag achterzijde

- ▶ Ondoordringbaar voor vocht
- ▶ Barrière tegen bacteriën

Superabsorberende kern

- ▶ Uitzonderlijk absorptie- en retentie-vermogen, ook onder compressie
- ▶ Bindt bacteriën en MMP's in de kern

Comfortabele vochtafvoerende laag

Snelle en doeltreffende distributie van exsudaat

Siliconen wondcontactlaag (enkel siliconen versie)

Atraumatische verwijdering en herpositionering, zelfs op de omliggende gevoelige huid

GEBRUIK

Indicaties

- ▶ Diabetische voetulcera
- ▶ Beenulcera (veneus en arterieel)
- ▶ Decubitus
- ▶ Eerste- en tweedegraads brandwonden
- ▶ Gedehiscerde chirurgische wonden

Fase wond




Exsudaatniveau

- ▶ Extra
Medium - Heel hoog
- ▶ Extra met siliconen
Laag - Heel hoog

Ontworpen om uitzonderlijke hoeveelheden exsudaat te verwerken die geabsorbeerd en vastgehouden worden in de superabsorberende kern (SAP's, natuurlijke vezels, en bij de siliconen versie een siliconen wondcontactlaag), zelfs onder compressie. MMP's en bacteriën worden gebonden in deze kern, wat bijdraagt aan de doeltreffende genezing van de wond.

Uitstekende verwerking van exsudaat (ook met hoge viscositeit), onder andere door grotere openingen dan gebruikelijk. De superabsorberende structuur van de kern garandeert continuering van absorptie van exsudaat.

Uitstekende absorptie en retentie van exsudaat,
ook onder compressie

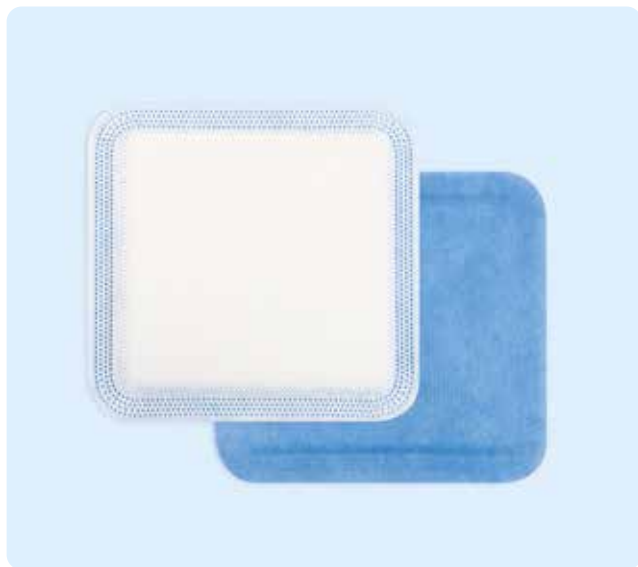

Superabsorberend verband extra



Superabsorberend verband extra
met siliconen wondcontactlaag

PRODUCTCODES


Type product	Referentiecode	Afmeting	Stuks per verpakking
Extra	SAX100100	10 x 10 cm	10 stuks
Extra	SAX100200	10 x 20 cm	10 stuks
Extra	SAX150150	15 x 15 cm	10 stuks
Extra	SAX200200	20 x 20 cm	10 stuks

Extra siliconen	SSAX100100	10 x 10 cm	10 stuks
Extra siliconen	SSAX100200	10 x 20 cm	10 stuks
Extra siliconen	SSAX150150	15 x 15 cm	10 stuks
Extra siliconen	SSAX200200	20 x 20 cm	10 stuks

SUPERABSORBEREND VERBAND MET ACTIEVE KOOL

ZONDER BORDER

Effectieve beperking van wondgeur
en een uitstekende verwerking van exsudaat

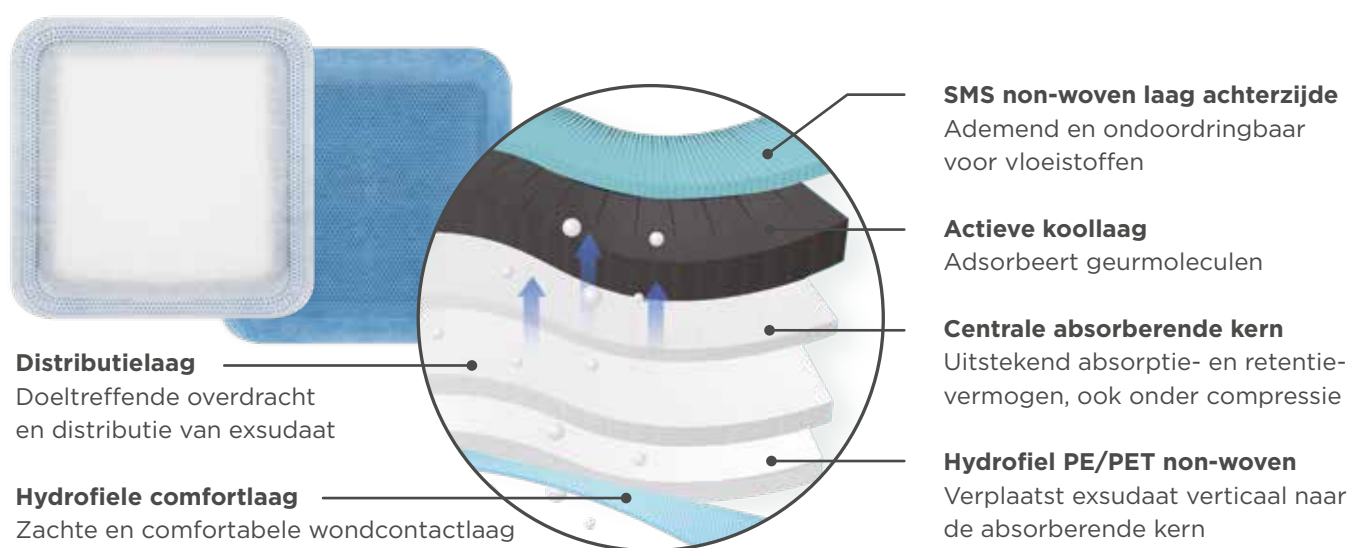

Een sterke wondgeur heeft een zeer negatieve impact op het leven van patiënten. Dit beperken zou een verplichte taak moeten zijn van zorgprofessionals! De actieve koollaag in Superabsorberend verband met koolstof, richt zich op deze wondgeur en zal deze op effectieve wijze helpen verminderen. De rest van het verband richt zich op de uitstekende verwerking van exsudaat, waarbij grote hoeveelheden geabsorbeerd en vastgehouden kunnen worden in de kern, zelfs onder compressie. De superabsorberende kern zal ook MMP's en bacteriën binden, wat verder bijdraagt aan een doeltreffende wondheling.

PRODUCTCODES

Referentiecode	Afmeting	Stuks per verpakking
SAC100100	10 x 10 cm	10 stuks
SAC100200	10 x 20 cm	10 stuks
SAC150150	15 x 15 cm	10 stuks

GEBRUIK

Indicaties

Voor onwelriekende wonden met medium tot hoog exsudaat.

- ▶ Diabetische voetulcera
- ▶ Beenulcera (veneus en arterieel)
- ▶ Decubitus
- ▶ Eerste- en tweedegraads brandwonden
- ▶ Acute wonden

Fase wond




Exsudaatniveau

Medium - Heel hoog



NIET-HECHTEND LIPIDO-COLLOÏDE VERBAND

Een vochtige omgeving bevordert wondheling en verwijdering aan 1 stuk. De grotere openingen verwerken exsudaat uitstekend!

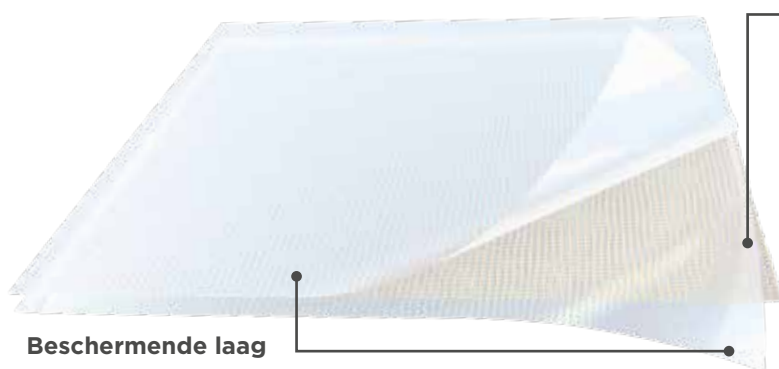

Beschermdende laag

Aan de boven- en onderkant

Niet verklevend wondcontactverband (polyester net), geïmpregneerd met zachte, niet-klevende matrix met superabsorberend coating (CMC), zachte paraffine en cohesieve polymeren. De superabsorberende coating vormen een gel bij absorptie van wondexsudaat. Dit zorgt voor een vochtige omgeving, wat de wondheling bevordert. Bovendien zorgt het verklevende effect van de gevormde gel er samen met het verklevende effect van lipiden (zachte paraffineolie) er voor dat het verband gegarandeerd atraumatisch verwijderd kan worden.

Polyester net

Geïmpregneerd met superabsorberend coating en petrolatum

GEBRUIK

Indicaties

Voor behandeling van wonden waarbij verkleven in het onderliggende weefsel vermeden dient te worden. Vaak gebruikt in combinatie met absorberende verbanden.

- ▶ Skin tears of schaafwonden
- ▶ Chirurgische excisies
- ▶ Eerste- en tweedegraads brandwonden
- ▶ Blaarvorming
- ▶ Beenulcera
- ▶ Decubitus
- ▶ Diabetische ulcera

Fase wond




PRODUCTCODES

Referentiecode	Afmeting	Stuks per verpakking	Close up
LT050050	5 x 5 cm	10 stuks	
LT100100	10 x 10 cm	10 stuks	
LT100200	10 x 20 cm	10 stuks	
LT150150	15 x 15 cm	10 stuks	

ZACHT SILICONEN PRIMAIR WONDERBAND

Atraumatische siliconen wondcontactlaag met grotere openingen voor exsudaatverwerking

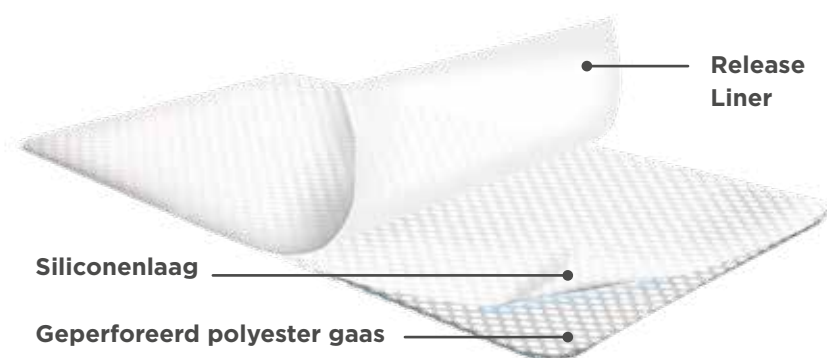

Siliconen Wondcontactlaag (éénzijdig), is een poreuze, niet-klevende, zachte siliconenlaag. De eenzijdig silicone coating is kleverig waardoor deze eenvoudig aangebracht kan worden. Hierdoor heeft de wondcontactlaag een betere hechting op de huid rondom de wond. Deze zachte hechting voorkomt ook vaak maceratie door de laterale beweging (van de wond naar de omliggende huid) van exsudaat tegen te houden.

Grotere openingen zorgen voor een betere verwerking van exsudaat met hoge viscositeit. De zachte silicone wondcontactlaag zorgt ervoor dat het verband zonder pijn of trauma van het delicate nieuwe weefsel verwijderd kan worden.

GEBRUIK

Indicaties

Voor behandeling van wonden waarbij verkleefing met het onderliggend weefsel vermeden dient te worden. Veel gebruikt in combinatie met absorberende verbanden. Toepassingen zijn o.a.:

- ▶ Skin tears of schaafwonden
- ▶ Chirurgische excisies
- ▶ Eerste- en tweedegraads brandwonden
- ▶ Blaarvorming (bijv. epidermis bullosa)
- ▶ Laceraties
- ▶ Partiële en volledige dikte transplantaten
- ▶ Beenulcera en decubitus
- ▶ Diabetische ulcera
- ▶ Huidschade door radiotherapie
- ▶ Behandeling met steroïden

Fase wond  

PRODUCTCODES

Referentiecode	Afmeting	Stuks per verpakking	Close up
SL050075	5 x 7.5 cm	10 stuks	
SL075100	7,5 x 10 cm	10 stuks	
SL100180	10 x 18 cm	10 stuks	
SL150200	15 x 20 cm	10 stuks	





Wilt u meer weten over onze B-WISE wondverzorgingsproducten?

Scan dan de QR-code hiernaast of ga naar www.bwisewoundcare.com.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met een van onze B-WISE Partners.



Onze B-WISE Partner voor Nederland en België

BAP Medical B.V. is een gerenommeerd bedrijf die sinds 2006 oplossingen levert voor o.a. wond- en huidproblemen. Ze staan dagelijks in nauw contact met patiënten, medici en behandelaars. Hierdoor hebben ze veel kennis over huidproblemen, wonden en (afwijkende) littekens. Een waardige partner voor onze B-WISE wondverzorgingsproducten.

Contact

BAP Medical B.V., Laan van Westenenk 64, NL-7336 AZ Apeldoorn.
T. +31 (0)55 355 25 80, info@bap-medical.com, www.bap-medical.nl

BAPMEDICAL
MEDICAL CARE FOR THE SKIN