

PNEUMASOX

COMPRESSION THERAPY

PneumaSox is een hulpmiddel voor compressietherapie aan het onderbeen (statische pneumatische compressie) en is ontworpen voor eenvoudig gebruik.



STAP 1

Plaats de voet in de PneumaSox (indien van toepassing eerst een onderkous aantrekken).



STAP 2

Sluit de PneumaSox om het been. Zorg ervoor dat de klittenbanden goed sluiten.



STAP 3

Indien gewenst, trek een schoen aan voordat de PneumaSox op druk wordt gebracht.



STAP 4

Sluit de handpomp (incl. druksensor) aan op het ventiel van de PneumaSox aan de binnenzijde van het been.



STAP 5

Voer de druk van de PneumaSox op door in de handpomp te knijpen.



STAP 6

Branden de 2 groene lichtjes continu, dan is de PneumaSox op de juiste druk.

Zie voor uitgebreide instructies de gebruiksaanwijzing.

A NEW WAY OF PERFECT COMPRESSION

MEESTGESTELDE VRAGEN

WIE BEPAALT DE JUISTE MAAT EN INSTELLING VOOR DE PATIËNT?

Het is belangrijk dat de zorgprofessional de juiste maat van de PneumaSox bepaalt en de te geven mmHg voor de patiënt instelt. Zie hiervoor de uitgebreide instructies in de gebruiksaanwijzing.

HOE CONTROLEER JE OF DE DRUK OM HET BEEN NOG VOLDOENDE IS?

Door zwelling (of afname) van het been zal de druk kunnen toe- of afnemen. Door de handpomp opnieuw aan te sluiten op het ventiel en de sensor in te schakelen kunt u eenvoudig zien of de druk nog juist is.

HOE VAAK PER DAG MOET DE DRUK GECONTROLEERD WORDEN?

Het is belangrijk om de druk door de dag heen regelmatig te controleren en eventueel aan te passen. 1 uur na het aantrekken, rond de lunchtijd en voor het avondeten zijn geschikte momenten om de druk te controleren. Vaker wordt aanbevolen.

WAT GEBEURT ER MET DE DRUK ALS DE SCHOEN UITGAAT?

De druk van de PneumaSox kan veranderen als de schoen uitgaat. Controleer daarom altijd de druk en pomp indien nodig lucht bij.

WAT MOET JE DOEN ALS DE SCHOEN WEER AAN GAAT?

Wanneer de PneumaSox reeds is opgepompt kan een schoen aantrekken lastig gaan. Laat dan de Pneumasox iets leeglopen. Na het aantrekken van de schoen kunt u de PneumaSox weer bijpompen.



PNEUMASOX.NL


PNEUMASOX[®]

COMPRESSION THERAPY

DE JUISTE MAAT BEPALEN

- ID* De lengte van de hak tot circa 5 cm onder de knieschijf.
 cB De omtrek van de enkel rond het smalste deel.
 cC De omtrek van de kuit rond het breedste deel.

Vergelijk de gevonden waarden met onderstaande tabel.

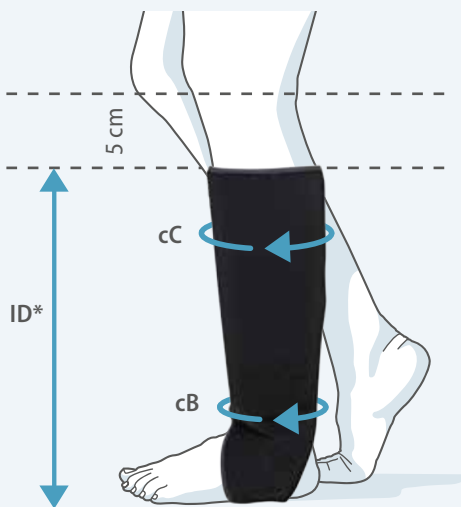

* Volg NIET de contouren van het been, maar meet in een rechte lijn.

Omschrijving	Voet	Artikelnr.	cC	cB	ID
Small Short	Rechts	40-1001	Kleiner dan 40 cm	Kleiner dan 30 cm	Kleiner dan 35 cm
Small Short	Links	40-2001			
Small Long	Rechts	40-1002	Kleiner dan 40 cm	Kleiner dan 30 cm	Groter dan 35 cm
Small Long	Links	40-2002			
Large Short	Rechts	40-1003	Groter dan 40 cm	Groter dan 30 cm	Kleiner dan 35 cm
Large Short	Links	40-2003			
Large Long	Rechts	40-1004	Groter dan 40 cm	Groter dan 30 cm	Groter dan 35 cm
Large Long	Links	40-2004			

DE VOORDELEN VAN PNEUMASOX

- Makkelijk toe te passen door verpleegkundigen & thuiszorgmedewerkers
- Voor het gebruik geen vaardigheid of kracht vereist
- Ideaal voor zelfzorg door de patiënt
- Kan gedragen worden met schoenen aan
- Tijd- en kostenbesparend in de zorg, zonder specifieke zwachtelkennis (verbandwissels) in te zetten
- Herbruikbaar (geschikt voor de wasmachine)
- Comfortabel door de gelijkmatig verdeelde druk
- Geschikt voor veneus ulcus cruris (ook in het gebied van de malleolus)

MEESTGESTELDE VRAGEN

HOE KAN JE DE DRUKSENSOR INSTELLEN OF RESETTEN?

Je kunt de druksensor instellen of resetten door het knopje van de druksensor 7 sec. ingedrukt te houden. De groene lampjes lichten dan even fel op. Vervolgens per 10 mmHg 1 keer kort drukken. Ter controle zullen de lampjes X maal knipperen waarbij X keer 10 de ingestelde druk in mmHg is. De druk is dan ingesteld en blijft ook na uitschakeling gehandhaafd.

HOE WEET JE ZEKER OF DE DRUK GOED INGESTELD IS?

Gebruik je de PneuMasox voor het eerst, dan staat standaard de druk ingesteld op 40 mmHg. De druk kan ingesteld worden van 10 - 100 mmHg. Bij inschakeling knipperen de lichtjes het aantal keer in tientallen druk dat ingesteld staat.

WAT DOE JE ALS DE LICHTJES CONTINU ROOD BRANDEN?

Branden de 2 lichtjes continu rood, dan is de druk in de PneuMasox te hoog. Laat dan via het ventiel lucht uit de PneuMasox lopen.

KAN JE DE PNEUMASOX WASSEN IN DE WASMACHINE?

Ja, PneuMasox (compressiedeel) kan in de wasmachine op 40 graden gewassen worden, maar is niet geschikt voor de wasdroger. Hang daarom de PneuMasox na het wassen losjes op om te drogen.

MOET ER EEN ONDERKOUS GEDRAGEN WORDEN?

Bij een beschadigde huid moet onder de PneuMasox altijd een onderkous gedragen worden. Indien extra compressie op de voet gewenst is, kan er ook een onderkous gebruikt worden.



MEER WETEN?

Scan de QR-code hiernaast of ga naar de site:

PNEUMASOX.NL

